



# MINICAM24

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**  
**Массажный пояс для похудения**



**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>1. Использование цифровой версии пояса .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Использование механической версии .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Использование зарядное панели .....</b>	<b>5</b>
<b>4. Внимание .....</b>	<b>5</b>
<b>5. Чистка и уход .....</b>	<b>5</b>
<b>6. Техника безопасности .....</b>	<b>6</b>
<b>7. Внимание .....</b>	<b>7</b>

### Механическая версия



- Деталь массажера
- Контрольная панель
- Разъем питания



- Кнопка усиление
- Кнопка стоп
- Кнопка ослабление

### Механическая улучшенная версия



- Инфракрасный подогрев
- Деталь массажера
- Контрольная панель
- Разъем питания



- Кнопка усиление
- Кнопка стоп
- Кнопка ослабление

### Цифровая версия



- Деталь массажера
- Контрольная панель
- Разъем питания




- Цифровой дисплей
- Вкл/Выкл
- Режим
- Время работы

### Цифровая улучшенная версия



- Инфракрасный подогрев
- Деталь массажера
- Контрольная панель
- Разъем питания

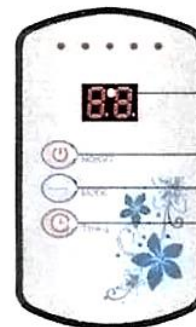

- Цифровой дисплей
- Вкл/Выкл
- Режим
- Время работы



## 1. Использование цифровой версии пояса

1. Наденьте массажный пояс на талию и отрегулируйте степень натяжения.
2. Подключите источник питания к адаптеру, а затем подключите разъем адаптера к разъему на массажёре.
3. Включите устройство.
4. Выберите режим работы.
5. Выберите время работы массажного пояса. Производитель рекомендует сессии длительностью пятнадцать минут.

## 2. Использование механической версии

1. Наденьте массажный пояс на талию и отрегулируйте степень натяжения.
2. Подключите источник питания к адаптеру, а затем подключите разъем адаптера к разъему на массажёре.
3. Включите устройство, нажав на кнопку Вкл/Выкл, и отрегулируйте силу воздействия, соответствующими кнопками усиления и ослабления, в соответствии с вашими пожеланиями.

### **3. Использование зарядное панели**

1. Относится только к цифровому версии.
2. Если машина не используется, она автоматически выключится через 1 минуту.
3. Заряжайте после использования заряда батареи. И заряжайте пояс, не оставляя без присмотра. Чтобы продлить срок службы батареи, отключайте питание сразу, как только зарядка завершена.

### **4. Внимание**

В процессе использования такие реакции тела, как легкий зуд, пот или онемение, являются нормальной реакцией и исчезают через определенное время после окончания процедуры. После использования массажного пояса рекомендуется выпить чашку теплой воды.

### **5. Чистка и уход**

1. Перед чисткой отключите питание и вытащите вилку из розетки.
2. Для ежедневного обслуживания и чистки используйте нейтральное моющее средство и ткань для того, чтобы протереть устройство. Не используйте агрессивные чистящие средства или органические растворители.
3. Несмотря на то, что устройство достаточно прочное, всё же необходимо избегать ударов, падений или сильного давления на него. А также избегать ударов твердыми предметами о поверхность, чтобы не сломать пояс.

## **6. Техника безопасности**

1. Не используйте никакое напряжение, кроме 220В.
2. Не используйте в ванных комнатах или других местах с повышенной влажностью. Не погружайте пояс в воду и не размещайте близко к воде, чтобы избежать короткого замыкания устройства или поражения электрическим током пользователя пояса.
3. Отключайте питание при чистке, если была обнаружена любая неисправность в использовании и после завершения использования.
4. Пожалуйста, не подключайте источник питания, во время грозы и молний, чтобы избежать возгорания машины и неблагоприятных последствий из-за чрезмерной силы тока.
5. Перед использованием убедитесь, что вилка плотно вставлена в розетку электросети.
6. Подключайте и отключайте питание, держась рукой за вилку. Не тяните за шнур рукой, это может привести к повреждению пояса или кабеля.
7. Не следует чаще необходимого подключать или выдергивать вилку из розетки.
8. Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить специальным шнуром от производителя или в отделе электроники. Шнур должен полностью соответствовать характеристикам оригинала.
9. Если массажный пояс неисправен, отправьте его на гарантийный ремонт в сервисный центр. Обратите внимание, что самостоятельный ремонт и вскрытие устройства аннулируют гарантийные обязательства продавца

## **7. Внимание**

Проконсультируйтесь со своим лечащим врачом перед использованием массажного пояса, если:

- У вас есть имплантированный кардиостимулятор или аналогичные имплантируемые устройства.
- У вас есть болезни сердца.
- Вы потянули или другим образом травмировали спину.
- Ваши кости хрупкие или были повреждены. Будьте особенно аккуратны при повреждениях позвоночника.
- После любой операции.
- Вы на данный момент беременны или недавно родили.
- Имеете злокачественную опухоль
- У вас остеопороз
- Имеются проблемы с кровообращением или тромбоз
- Имеется кожная инфекция
- Недавно лечились или госпитализировались
- У вас есть травма спинного мозга, вызванная несчастным случаем, аварией или болезнью.

**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**